




- 01** Vask området med vann og sørg for at huden er helt tørr. (NB: Plateforlengeren fester seg ikke til fuktig hud)

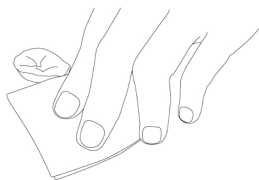


- 02** Fjern det ytterste hvite papiret, merket No.1.

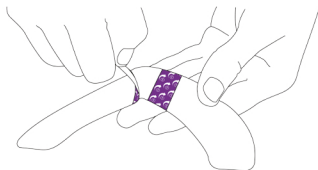

- 03** Legg plateforlengeren der du ønsker på stomiplaten og stryk den på plass med hånden.

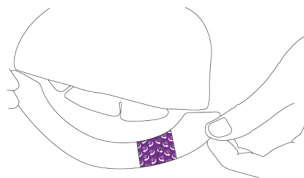

- 04** Fjern det hvite papiret, merket No. 2, og glatt den ned på plass.

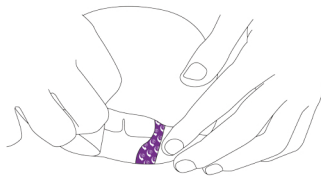

Trio Silex. Den avanserte, myke, plateforlengeren i silikon.

- Plateforlenger i silikon
- Super tynn – som et ekstra hudlag med umiddelbart feste
- Vannfast og ikke-absorberende – perfekt for bading og svømming
- Lar huden få puste, redusert risiko for hudirritasjon
- Fjernes i et stykke – etterlater ingen rester

For spørsmål eller flere vareprøver,
ring oss på tlf: 41 34 31 81/ 92 11 72 67
send mail til: post@ubrmedical.no/ camilla@ubrmedical.no
eller besøk oss på: www.ubrmedical.no

